


**ERGONOVA**

# FeelNeck 2mini

shoulder massager / массажер для шеи и плеч

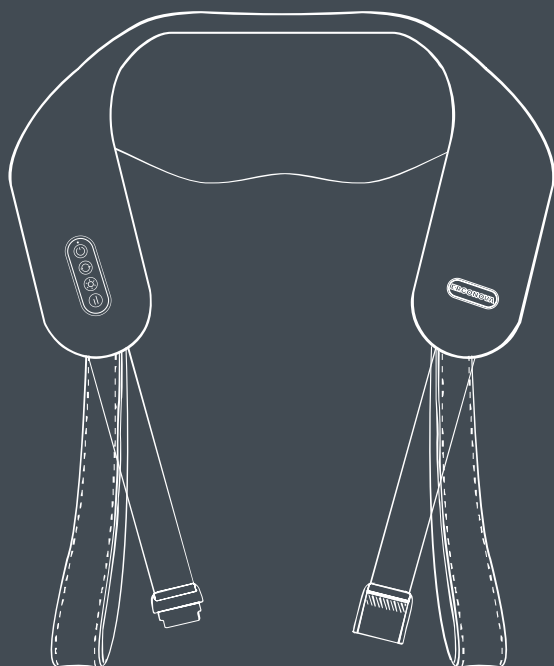

Fascial  
Deep  
Edition



Поздравляем с приобретением массажера для шеи Ergonova FeelNeck 2 mini!  
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества.  
С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova - надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА .....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА .....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ .....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ .....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8

# Правила техники безопасности

При использовании продукта всегда следует соблюдать все инструкции и основные меры предосторожности, включая следующие:

**ВНИМАНИЕ** - Для снижения риска поражения электрическим током, всегда отключайте данный прибор от электрической розетки перед использованием.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Во избежание получения ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

- Никогда не оставляйте массажер без присмотра, если он подключен к сети. Вынимайте вилку из розетки, когда изделие не используется, а также перед чисткой и снятием аксессуаров.
  - Не используйте массажер под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев массажера может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
  - Никогда не используйте устройство с закрытыми вентиляционными отверстиями. Не допускайте загрязнения вентиляционных отверстий пылью, волосами, ворсом.
  - Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
  - Не используйте массажер на открытом воздухе.
  - Не включайте прибор в местах, где используются аэрозольные(распыляемые) средства или кислородные баллоны.
  - Не вставляйте и не извлекайте вилку мокрыми руками. Может привести к поражению током.
  - Не переносите данное изделие за кабель питания и не используйте шнур в качестве ручки.
  - Используйте напряжение, соответствующее маркировке на приборе.
  - Выньте вилку из розетки сразу же после отключения питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
  - Не используйте массажер, если кабель и вилка повреждены, он неисправен, его роняли, повредили или опустили в воду. Отнесите в сервисный центр для дальнейшей диагностики.
  - Не используйте массажер в неисправном состоянии. Рекомендуется немедленно заменить неисправные компоненты и не использовать прибор до полного устранения неисправностей.
  - Используйте прибор только так, как описано в настоящем руководстве.
  - Держите кабель подальше от нагретых поверхностей. При обнаружении неисправностей немедленно прекратите использование и отключите прибор от источника питания.
- Во избежание получения травм и повреждения конструкции, не разбирайте массажер самостоятельно, свяжитесь с продавцом или производителем до последующего ремонта.
- Прибор предназначен для использования только с аксессуарами, входящим в комплект поставки прибора.
  - Устройство имеет нагретую поверхность. Пользователи нечувствительные к высокой температуре должны использовать прибор с осторожностью.
  - Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Данное устройство содержит аккумуляторы, которые не подлежат замене.
  - Данное устройство содержит аккумуляторы, которые могут быть заменены только квалифицированными специалистами.

**Если вы почувствуете недомогание во время использования прибора, то немедленно прекратите процедуру.**

**Люди, имеющие следующие заболевания, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.**

1. Наличие имплантируемых медицинских устройств и кардиостимуляторов.
2. Нарушения температурной чувствительности.
3. Наличие злокачественных опухолей.
4. Сердечные заболевания.
5. Беременные и недавно родившие.
6. Искривления и заболевания позвоночника.
7. Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения.
8. Наличие шрамов на коже.
9. Нуждающиеся в покое или со слабым здоровьем.
10. Остеопороз, переломы, растяжения связок, мышечные боли и т.д., острая (головная) боль.
11. Температура выше 38°C (жар).
12. Воспалительные заболевания, усталость, озноб, давление и т.д. Тяжелый, изнуряющий стресс.
13. Тендинит.
14. Проходящие лечение в медицинских учреждениях


	Устройство не предназначено для коммерческого использования или в медицинских целях. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием.
	Используйте только в помещении!
	Не используйте устройство во влажных помещениях (например, во время приема ванны или душа).
	Не помещать в воду! <ul style="list-style-type: none"><li>• Сухая чистка запрещена!</li><li>• После использования этого продукта в течение 10 минут рекомендуется сделать 30 минутный перерыв перед повторным использованием</li></ul>

## Утилизация





Эта маркировка указывает на то, что данное изделие запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, сортируйте и сдавайте их на переработку, чтобы способствовать эффективному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь пунктами приема или обратитесь к розничному продавцу, у которого было приобретено изделие. Они помогут сдать прибор на экологически безопасную переработку.


## Наименование деталей и функции массажера

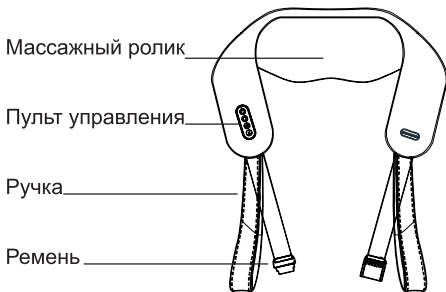


Type-C разъем (на обратной стороне)

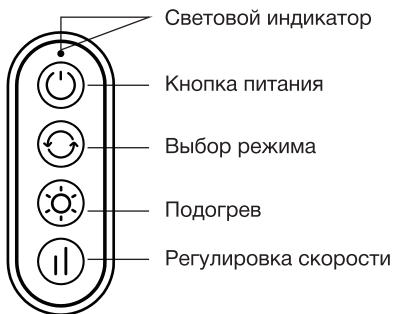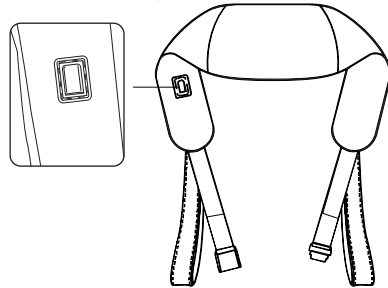

Кабель для зарядки типа Type-C

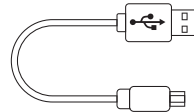

## Области массажа

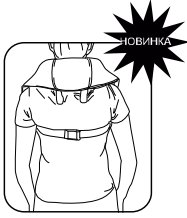

Массаж лопаток без использования рук.

Доработанная версия массажера позволяет наслаждаться массажем во время работы.



Массаж шеи.



Массаж поясницы.



Снятие усталости с ног.

## Использование массажера

### Перед использованием

Проверьте комплектность поставки, наличие аксессуаров и отсутствие повреждений.

### Включение питания

Зажмите кнопку питания в течение 2 секунд, устройство включится.

### Выбор программы

1. После включения устройство будет работать в режиме №1, быстро нажмите на кнопку выбора режима, чтобы переключиться между первым и вторым режимом.
2. Функция подогрева: после включения автоматически будет включен сильный подогрев. Нажимайте на кнопку подогрева, чтобы включить слабый подогрев, выключить и включить сильный подогрев.
3. Функция интенсивности: после включения устройство автоматически запустится с уровнем интенсивности 1, после нажатия кнопки интенсивности можно переключаться между уровнями 1 и 2.

### Отключение питания

Устройство автоматически выключится через 10 минут использования.

**Отключение вручную:** устройство выключится после зажатия кнопки питания в течение 2 секунд.

## Рекомендации по зарядке

1. Прибор нельзя использовать во время зарядки.
2. Вставьте кабель для зарядки в штекер, после чего вставьте зарядное устройство в розетку.
3. Прибор оснащен функцией самозащиты и автоматически прекращает работу, если он подключен к зарядке во время работы.
4. Когда заряд батареи составляет менее 20%, индикатор загорается красным.
5. После полной зарядки индикатор мигает белым светом.

Допустимо легкое нагревание прибора и зарядного штекера во время зарядки.

### Время зарядки

Время зарядки составляет 3,5 ч.

### После зарядки

После зарядки выньте вилку из розетки.

## **Внимание**

- Во время зарядки используйте кабель, идущий в комплекте с устройством.
- В комплект поставки входит кабель питания типа Type-C.
- Используйте адаптер питания DC 5V-2A.
- Во избежание износа батареи заряжайте ее не реже, чем раз в полгода

## **Рекомендации по уходу**

### **Чистка**

Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено, а вилка вынута из розетки.


Для чистки устройства используйте сухую, мягкую ткань.

### **Обслуживание**

Храните изделие в чистоте и вдали от влажной среды.

### **Чистка рекомендуется только в случае необходимости**

- Потрите прибор влажной, предварительно отжатой мягкой тканью
- Не используйте спирт, растворители, бензин или жидкость для снятия лака. Их использование может привести к повреждению прибора, появлению трещин или изменению цвета обивки.

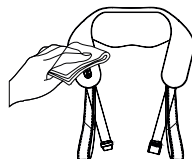

## **Устранение неисправностей**

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
Не удается включить устройство.	Кабель питания не плотно вставлен.	Пожалуйста, вставьте кабель плотнее до характерного "щелчка".
Прибор останавливается во время работы.	Прибор автоматически выключается примерно через 10 минут после включения.	Не является неисправностью.
Устройство не нагревается.	Прибор используется при температуре, превышающей рекомендуемую.	Используйте прибор при рекомендуемой температуре 15 °C - 35 °C.

Если ваша проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.



# Технические характеристики

Наименование: Массажер для шеи

Модель: FeelNeck 2 mini

Входное напряжение: 5В --- 2А

Потребляемая мощность: 26 Вт

Емкость аккумулятора: 1800 мАч

Месяц и год изготовления указаны на упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

[info@ergonova.ru](mailto:info@ergonova.ru)

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/about/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





# ERGONOVA



Designed by Ergonova Germany  
[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

